

FUJIIRYOKI

温めながら、もみほぐす。
今日の疲れに、
ごほうびマッサージ。



FOOT MASSAGER

フットマッサージャー SG-520



じんわり温めながらマッサージ
ヒーター機能搭載

足先、足裏、ふくらはぎまでリフレッシュ!


ふくらはぎを、ぐぐっともみほぐす!

まるで羽根のように動く左右のもみ板が、スウィングしながらしっかりふくらはぎをもみほぐし。




ぎゅつぎゅつ

突起が
くいくい刺激!

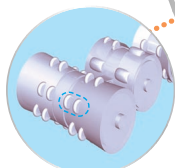

もみ板で
人の手感覚の
心地よさを実現!

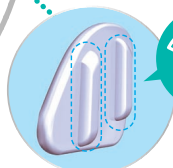

背面から足をらくらくスルーイン!

ご高齢者の方でも、スカートの方でも、
背面スルーインだから機械をまたがず使えます。



足裏全体をくいくい刺激!

突起付マッサージャーが足裏のマッサージポイントをくいくい刺激。

もみ効果+ヒーターで
心地よさアップ!

疲れた足全体の筋肉を、まるで手のひらで包み込むようにマッサージ。
ヒーター機能搭載で、より快適にお使いいただけます。

※イラストはすべてイメージ図です。

シンプルで簡単な 操作方法

もっと快適に、目的に合わせて使える 「自動3コース」搭載!



手動ボタン

もみ板と足裏マッサージの連続動作を「遅」「中」「速」の3段階に速度調節できます。



[操作パネル]

自動ボタン

もみの速度変化や保持の組合せで3つの自動コースを選択できます。

しっかりコース

速い動きでふくらはぎをもみ上げます。運動後や立ち仕事の疲れなどに。

ランダムコース


遅い動き、早い動き、緩急使い分けたりズミカルな動作が楽しめます。

ゆったりコース

ゆっくりとした動き&じっくり保持(ホールド動作)。やさしく、しっかりもみほぐします。

約15度の角度調節

本体スタンドを使えば、椅子の高さや座った姿勢などに合わせて約15度の角度調節が可能です。

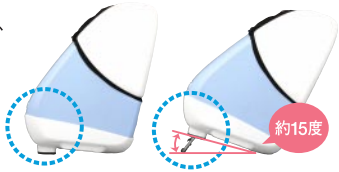

外して洗える 着脱式布カバー

ファスナーを外せば中のカバーを取り外して丸洗うことができ、常に清潔な状態でご利用いただけます。



布カバーは 制菌加工

制菌加工は、繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定してコントロールすることを目的とした加工です。



フットマッサージャー SG-520

[管理医療機器]

医療機器認証番号:222AGBZX00172000

JANコード:4951704134019

メーカー希望小売価格: **59,800円**

仕様

- 本体寸法(約):幅480×奥行390×高さ440mm
- 質量(約):13.5Kg ● 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:180W(ヒーターのみ:110W)
- 定格時間:20分



効能・効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

ハローキティモデルもあるよ!

2010年10月発売

フットマッサージャー
SG-520(KT) [管理医療機器]

医療機器認証番号:222AGBZX00172000

メーカー希望小売価格: **オープン価格**



©1976, 2010 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. S511271



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方。
 - (例) 血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ● 妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき) ● 皮膚に創傷のある方 ● 急性疾患(疼痛性)のある方 ● 骨粗しょう症の方 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の方 ● 知覚障害の方 ● 心臓に障害のある方 ● 温度感覚喪失が認められる方 ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ● 背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ● 貧血症の方 ● かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する場合 ● 安静を必要とする方 ● 医師の治療を受けている方 ● 上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。



携帯サイト「ここフジ医療器」では、毎月、フジ医療器の人気商品をプレゼント!

年間プレゼント総額 **100万円以上!**

応募方法

- ① 携帯サイト「ここフジ医療器」にアクセス
- ② http://koko1.mobi/user/join.php?id=795121
- ③ アンケートに答えて応募

QRコード



ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

0120-027-612

受付時間: 9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.fujiiryoki.co.jp>

パソコンからもお得なプレゼントキャンペーン
(最大30万円以上の商品!)を毎月実施中

●お求めは...