

FUJIROYOKI

水のチカラが、
目を覚ます。
胃腸にも、環境にも、やさしい。テレビの、水。



アルカリイオン整水器F8

テレビ®

FW-407

ALKALINE IONIZED WATER APPARATUS



フジ医療器はチーム・マイナス6%に参加しています。



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

いちばん手軽な健康管理。 あなたの、家族の新しい習慣に。

明日の健康のベースとなるもの。

それは、毎日の暮らしに欠かせない「水」にこだわること。

飲む水、食事に使う水、暮らしを清潔に保つ水…。


健やかな暮らしを、水を見直すことから始めませんか。

アルカリイオン整水器「トレビ」がお手伝いします。





アルカリイオン整水器と、浄水器とは、 どこが違うの？

浄水器は、水道水に含まれている残留塩素や不純物を除去した、きれいな水をつくるもの。アルカリイオン整水器は、不純物やカルキ臭を除去した浄水を、さらに電気分解しアルカリイオン水と酸性水をつくるもので、その機能も生成される水の性質もまったく違います。アルカリイオン整水器なら、水道水をさらにおいしくする浄水だけでなく、健康によいアルカリイオン水をご家庭で手軽に生成できるのです。

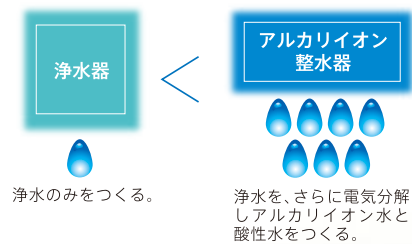

アルカリイオン整水器のしくみ。

水道水を浄水した後、さらに電気分解します。それによりマイナスの電極にはアルカリイオン水が、プラスの電極には酸性水がつけられます。

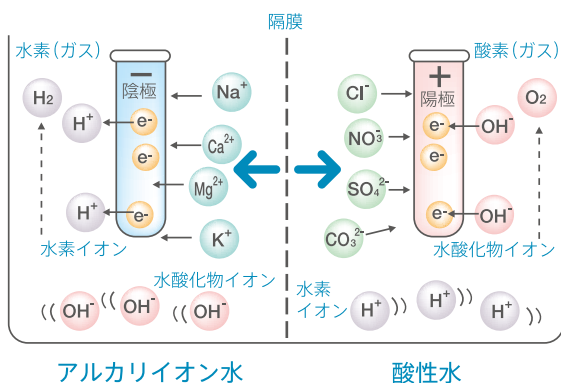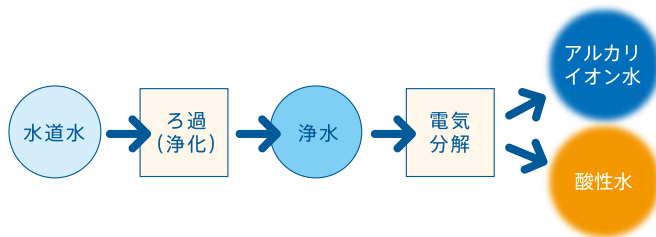

*アルカリイオン水は電解還元水とも言われています。



キッチンのデザインに合わせて
選べる3つのカラーバリエーション。



Stylish color **Pearl White**
パールホワイト



Stylish color **Dark Silver**
ダークシルバー



Stylish Color **Wine Red**
ワインレッド

キッチンに調和する

Stylish Color



背面もスッキリ仕上げています。



Pearl White



Dark Silver

※シャワー式など蛇口によっては元付け分岐栓が必要です。

胃腸にやさしい。

胃腸の症状を改善へと導く、アルカリイオン水。

アルカリイオン水の大きな特長は、胃腸症状改善に働きかけることです。代表的な例として、胃もたれなど、胃の不快感をやわらげるなどの効果が認められています。毎日、飲み続けることで、気になる胃腸の症状を少しずつやわらげます。

アルカリイオン水の効能・効果

胃腸症状の改善

胃もたれ

胃の不快感をやわらげる

胃腸の働きを整える

お通じを良好に

アルカリイオン水の飲みはじめは、**pH8.5 アルカリ1**が、おすすめです。



浄水



赤ちゃんのミルクに

酸性水



薬を飲むときに



洗顔として

「トレビ」は、アルカリイオン水のほかに、浄水、酸性水もつくることができます。

浄水は赤ちゃんのミルクや薬の服用にとっても適しています。またお肌を引きしめる酸性水は、洗顔に使用するのが、おすすめです。

溶存水素量アップ
50%
※FW-307比較

活性酸素を中和すると言われる注目の「溶存水素量」が、50%アップ。※FW-307比較


秘密は新開発、高効率電解槽の採用。

新しいトレビは5枚の電極、高効率電解槽を新採用。電解能力がアップすることにより、業界最大レベルの吐水量を維持しながら、同時に排水量を抑え、さらには従来の機種より50%も高い溶存水素たっぷりのアルカリイオン水を生成することが可能になりました。

たっぷり水量
5.5L

業界最大レベル！
毎分約5.5Lのたっぷり水量。


飲んだり、米とぎや野菜洗いなど、料理に使ったり。毎分約5.5Lという余裕の水量は、業界最大クラス。だから水量を気にすることなくお使いいただけます。

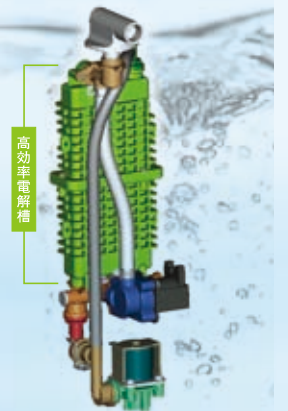

やさしい、7つの水。

健康のために、
おいしさのために。
目的に合った7つの水。

●用途に合わせた7つの水

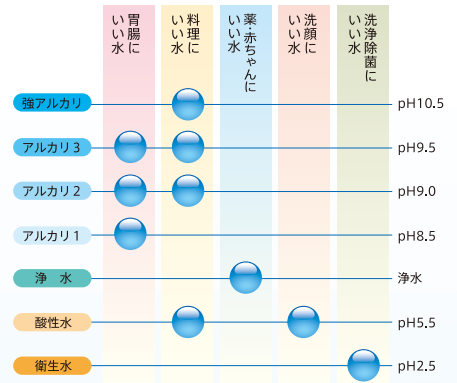

健康づくりや、お料理などに

アルカリイオン水 [pH10.5~pH8.5]

料理をはじめ、お茶やコーヒー、さらに毎日の健康習慣など、アルカリイオン水の用途は本当に多種多様。シーンや目的に合わせて、お役にてください。

pH10.5 強アルカリ

野菜のアク抜きなど、料理の下ごしらえに。



pH9.5 アルカリ3

料理やお茶など、ひと味違うおいしさに。



pH9.0 アルカリ2

米とき、炊飯に。ご飯をふっくら炊きあげます。



pH8.5 アルカリ1

アルカリイオン水の飲みはじめは、ここから。



欲しい水がすぐにわかる 使いやすい操作パネル。

大きく見やすい操作パネルなので、整水機能がひと目で確認できます。難しい操作もなく、ボタンひとつで用途に合った水が選べます。



きれいで安心

薬を飲む時や赤ちゃんのミルクに、おすすめします。

浄水



毎日のお肌のお手入れに

洗顔に、お肌を引き締める洗顔水としても利用できます。

酸性水 [pH5.5]



食器の洗浄除菌に

キッチンや浴室の洗浄に使えます。

衛生水 [pH2.5]



衛生水 ミニ情報

こんなとき、こんな場所に。衛生水の便利な使い方

衛生水とは、“強酸性水”ともいい、洗浄除菌作用のある水なので、暮らしのいろんなシーンで便利に利用できます。

- 除菌洗浄に ●まな板をつけ置き洗い。 ●カビ対策に ●タイルの汚れを落とした後にスプレー。
- 足裏のお手入れに。 ●消臭に ●お部屋やトイレのにおい消しに。
- 食器や冷蔵庫内の洗浄に。 ●掃除に ●床、たたみ、壁のお掃除に。



環境にやさしい。

新しい「トレビ」は、節水・節電など、環境にやさしいエコ機能をプラス。

アルカリ生成量アップ
約**1.1t**
※当社比

節水機能で水資源を無駄なく。年間約2.5t節水

アルカリ生成水量がアップ。

20Lのアルカリイオン水の生成に対して、酸性水(排水量)が、当社従来機種に比べて約4分の1に、年間約1.1tの節水が可能になりました(当社比^{※1})。浄水モードでは排水はされません。

※1 アルカリイオン水を1日20L生成するとして1日の節水量3L×365日(アルカリ1・2・3を選択した場合です)。

年間で約2.5t節水




ペットボトル
1200本分(2L)

捨て水ゼロ
約**1.4t**
※当社比

通水始めの捨て水をゼロにする「捨て水ゼロモード」。

アルカリ1、2、3の場合、10分以内に再使用すると捨て水なしで使用できます^{※2}。捨て水ゼロモードにより、年間約1.4tの節水ができます(当社比^{※3})。

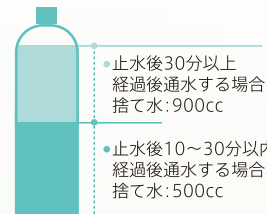

止水後30分以上経過後通水する場合
捨て水: 900cc
止水後10~30分以内経過後通水する場合
捨て水: 500cc

※2 強アルカリイオン水、酸性水を選択した場合は、捨て水ゼロモードにはなりません。
※3 10分以内の再使用が1日8回あるとして(1回500ml)。

無駄な電力
1/7
※当社比

節電機能で使用電力を最小限に。

待機電力を約3Wから約0.4Wに。

待機電力を従来の約3Wから約0.4Wに低減しました。節電機能で、環境にも家計にもやさしいトレビです。



自動電源ON/OFF機能を採用。

通水すると自動的に電源がONになります。また使用后10分後に電源がOFFになり、手間なく電気代の節約ができます。



無駄なゴミ
ゼロ

ゴミの軽減にも貢献。

ペットボトルなどのゴミの軽減に。

ペットボトルの水の購入が減ることで、廃棄の手間が不要になるだけでなく、ゴミの軽減にもつながります。毎日、気軽にエコ活動に貢献!



アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。



AAIWA アルカリイオン整水器協議会ホームページ
<http://www.3aaa.gr.jp/>

- アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
- アルカリイオン水の効能・効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行なっています。

株式会社フジ医療器は、アルカリイオン整水器協議会へ加盟しています。

人にもやさしい。

暮らしを便利に、
おしゃれに彩る新トレビ。

オートクリーニング機構。


◎リアルタイムリフレッシュ機能

電極の極性を瞬時に入れ替えることで、電極板へのカルシウムの付着を減らし、電解能力をバックアップします。

◎オートフレッシュ機能

アルカリイオン水の積算生成量が10Lを超えた止水10分後に、自動的に10秒間の逆電解を行います。

トレビのお手入れは、トレビがする。

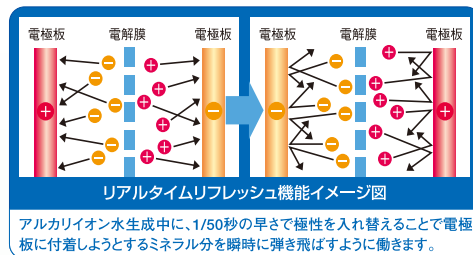

電解能力をアップさせるHiモード。


pHの出にくい地域では、Hiモードにより電解能力をアップさせることができます。Hiモードを選択すると、pHの実力値が約0.5アップします。*1

*1合成水を使用しての当社調べ




スタイリッシュなデザインも魅力です。

シンプルでスタイリッシュなデザインなので、キッチンをおしゃれに演出します。また背面もすっきり仕上げていますので、カウンターキッチンやアイランドキッチンにもすっきり配置できます。

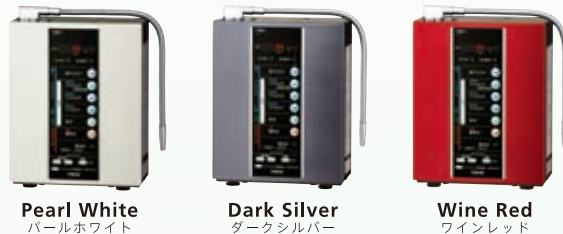


ダブルカートリッジでしっかりガード。

カルキ臭や総トリハロメタン*1は活性炭で、水に溶けこんだ鉛はセラミックで除去。また赤サビや雑菌などマイクロの汚れは中空糸膜フィルターでしっかりキャッチします。また水の含まれるミネラル分はそのままに、クリーンな水をつくります。

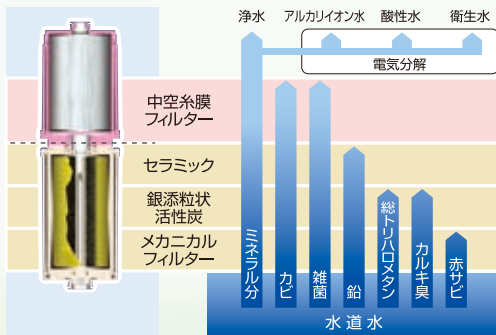

中空糸膜フィルター

0.1 μmの微細な穴があいたポリスルホン中空糸(パイプ状の糸)を束ねたものが中空糸膜。赤サビやマイクロの汚れをろ過しつつ、ミネラル分はそのまま通します。

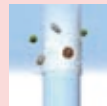

セラミック

特殊製法で活性炭にブレンドされたセラミックが溶解性鉛を除去します。

銀添粒状活性炭

銀添粒状活性炭が、残留塩素(カルキ臭)やトリハロメタンを除去します。

メカニカルフィルター

水道水の気になる赤サビ(約50 μm以上)を除去します。

*1 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ブromoジクロロメタン、ジブromoクロロメタン、ブromoホルムの4種類の化合物の総称です。

カートリッジの交換時期の目安は

カートリッジの処理能力は、16,000Lです。
(残留塩素処理能力を目的とした場合)

※ カートリッジ交換ランプが点灯し、交換をお知らせします。

1日のご使用量が40Lの場合
約1年

1日のご使用量が20Lの場合
約2年

上下どちらかの交換で、ランニングコストをダウン。

1日のご使用量が40Lの場合
約1年

交換時には、上のカートリッジをシマジン除去に優れたFW-02Siに換えることもできます。また、上下どちらか交換時期のきた方だけを交換できるため、ランニングコストも抑えます。



操作パネルの表示で、交換時期もすぐわかります。
※画像のランプ点灯はイメージです。

●FW-407専用選択カートリッジ

	型式	希望小売価格
標準	中空糸膜 + 活性炭 FW-01CN (FW-02C + FW-03N)	14,175円 (税抜:13,500円)

●FW-407専用交換カートリッジ

カートリッジ交換時は、上カートリッジが中空糸膜タイプ「FW-02C」か繊維状活性炭「FW-02S」の2種類から選べます。

標準	型式	希望小売価格	浄水能力					交換時期の目安※3
			逆残留塩素※1	濁り※2	溶解性鉛※1	総トリハロメタン※1	CAT農業※1	
上	標準 中空糸膜	FW-02C 7,875円 (税抜:7,500円)	16,000L	16,000L	16,000L	3,000L	16,000L	約1年 (40L/日使用時)
下	標準 活性炭	FW-03N 7,875円 (税抜:7,500円)	16,000L	16,000L	16,000L	3,000L	3,000L	
上	オプション 繊維状活性炭	FW-02S 7,875円 (税抜:7,500円)	16,000L	16,000L	16,000L	3,000L	16,000L	

●カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなる場合があります。
(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が短くなる場合があります。)

- ※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率80%の値
- ※2 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過流量50%の値
- ※3 カートリッジの寿命設定が総トリハロメタンの時は、40L/日使用で約2.5ヵ月になります。

フジ FW-407

アルカリイオン整水器F8 [管理医療機器]
医療機器認証番号 221AKBZX00045000

[同梱付属品]

- 分岐栓
- 分岐栓取り付け用付属品
- グリセリン酸カルシウム
- 衛生生成用食塩
- pH測定液セット 他



仕様

- 本体寸法(約)幅255×奥行120×高さ347mm
- 質量(約)6.6kg(満水時)
- 定格/AC100V(50-60Hz)
- 消費電力/250W(待機時:約0.4W)
- 電源コード(約)2.5m
- 給水方式/吐水蛇口分岐栓
- 給水接続/レバー切替
- 使用可能水道圧/約70~750kPa[約0.7~7.5kgf/cm²]

●電解
(電解能力切替)アルカリ性4段階、酸性1段階、衛生水1段階
(処理水量)

アルカリ1,2,3 動水圧100kPaの場合	吐水量(約) / アルカリイオン水	排水量(約) / 酸性イオン水	浄水時(約) /
	:2.65L/分	:0.15L/分	:2.8L/分
アルカリ1,2,3 動水圧350kPaの場合			
	:5.50L/分	:0.29L/分	:5.8L/分

●浄水カートリッジ

- (ろ過材料) 活性炭、セラミック、中空糸膜
- (能力) 残留塩素のろ過水量:約16,000L※1
- 総トリハロメタンのろ過水量:約3,000L※1
- 溶解性鉛のろ過水量:約16,000L※1
- 2-MIB(カビ臭)のろ過水量:約3,000L※1
- 濁りのろ過水量(濁度2度):約16,000L※2
- ※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験で除去率80%の値
- ※2 家庭用浄水器試験方法(JIS S3201)に準拠した試験でろ過流量50%の値
- (寿命) 残留塩素・溶解性鉛・濁りを対象とした場合:約1年間(1日の使用水量約40Lとして)
- 総トリハロメタン・2-MIBを対象とした場合:約2.5ヶ月間(1日の使用水量約40Lとして)

メーカー希望小売価格: **260,400円** (税抜:248,000円)
標準工事費:15,000円(税込)
【追加部品が必要な場合は別途費用を申し受けます】
(別売品) グリセリン酸カルシウム(15g入り) 標準価格:1,155円(税込)



PW (パールホワイト)
JANコード:4951704417129



DS (ダークシルバー)
JANコード:4951704417136



WR (ワインレッド)
JANコード:4951704417143



■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■アルカリイオン整水器のご注意

●腎疾患(腎不全、カリウム排せつ障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。

●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。

- ①医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。
- ②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。

●次の方はご使用前に医師にご相談ください。

- ①持病のある方または身体の弱っている方。
- ②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。
- ③医師の治療を受けている方。

●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1~2杯)、2週間程度アルカリイオン水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。

●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。

●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。

- ①肌の弱い方。
 - ②アレルギー体質の方。
- 酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。
 - 本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。
 - 飲用に合格した水を使用してください。
 - 元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。



使用上のご注意

- 水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によってカートリッジ寿命に差がでます。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
会 社

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎0120-027-612
URL: <http://www.fujiiryoki.com>



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成21年4月 現在のものです。

●お求めは...